

## Teie veenide kaitseks

### Hoiab ära:

- veenikahjustused,
- mädanikud,
- tursed,
- ebasteriilsed süstimised.

Takistab  
tahkete  
osakeste  
sattumist  
veeni.

Sterifilt



STERIILNE  
ÜHEKORDNE  
FILTER

**Vahend** riskide maandamiseks


Materjali on trükinud eesti keeles  
Tervise Arengu Instituut Aphoticom  
„Sterifilt“ materjali alusel.

Sterifilt



Sterifilt – steriilne ühekordne filter,  
mis tagab parema puhtuse ja  
suurema tõhususe kui vatifiltrid.  
Sterifilt kõrvaldab suurema koguse  
lisandeid ja peab kinni väiksema  
koguse toimeainet.


## Kasutusjuhend

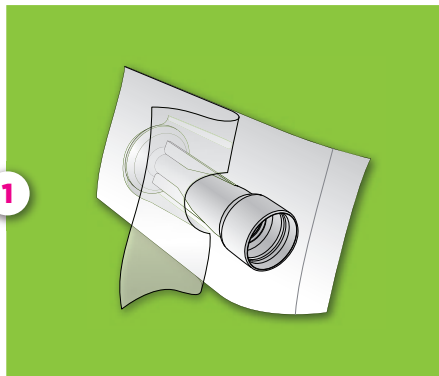

- Peske käed ja süstimiskoht.
- Valmistage ette süstitav aine.
- Avage Sterifilti pakend.


**Ärge puudutage membraani!**

Filter Sterifilt sobib praktiliselt igat tüüpi fikseeritud nõelaga süstaldele, aga ka KÕIGILE eemaldatava nõelaga süstaldele.

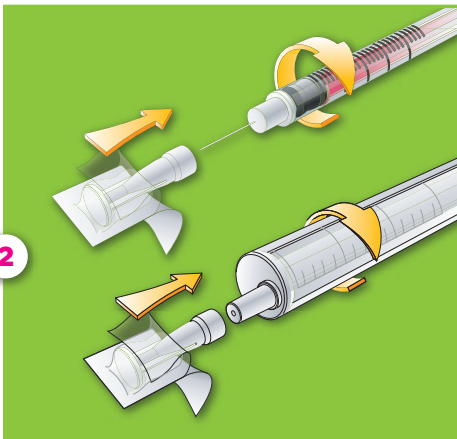

- Asetage Sterifilt süstlale. Kui kasutate eemaldatava nõelaga süstalt, paigaldage Sterifilti filter süstlanõela kinnituskohale.
- Vajutage ja keerake Sterifilti filtrit süstlal, et see kinnituks tihedalt ja õhukindlalt.

Filter Sterifilt peab kinni 93% kõigist lahustumatutest osakestest, mis on suuremad kui 10 mikronit. Filter Sterifilt on mõeldud ühekordseks individuaalseks kasutamiseks. Korduvkasutus ei ole soovitatav filtri vähenenud efektiivsuse tõttu.

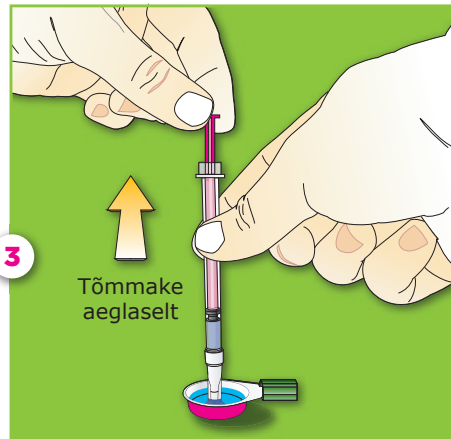

- **Tõmmake süstlakolbi aeglaselt.** Vastasel juhul satub süstlasse õhku.
- **Desinfitseerige süstimiskoht.**
- Eemaldage süstlalt Sterifilti filter.

Filter Sterifilt hoiab kinni 5 korda vähem toimeainet kui vatifilter ja vähendab riske, mis on seotud filtrite korduvkasutusega, aga ka ühe filtri kasutamisega mitme isiku poolt ning hepatiit C ülekandumisega seotud riske.